


## Porte I/O

Il Monitor di grado medicale ha un set completo di porte I/O. Le porte sono posizionate lungo il bordo posteriore inferiore dell'unità.


Fronte



Retro

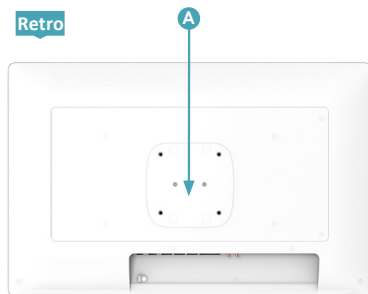

Pulsanti

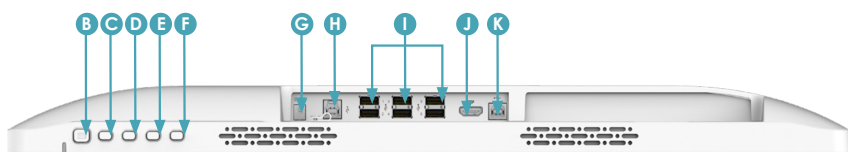

<b>A</b> 100 X 100 mm montaggio VESA	<b>G</b> DC-input
<b>B</b> Pulsante di accensione	<b>H</b> USB Type-B x connessione touchscreen
<b>C</b> Pulsante incremento/DX	<b>I</b> USB 2.0
<b>E</b> Pulsante decremento/SX	<b>J</b> HDMI input
<b>D</b> Pulsante Menu/Enter	<b>K</b> USB Type-B input
<b>F</b> Pulsante Exit/Return	

## Pulizia dello schermo

- Per pulire il touchscreen è possibile utilizzare una soluzione detergente per schermi che non contenga alcol e non sia abrasiva.
- Si consiglia la pulizia con un panno in microfibra
- Distribuire la soluzione sul panno e poi pulire il touchscreen.

## Pulizia dell'involucro antimicrobico

- Per pulire la custodia, utilizzare un panno morbido/non abrasivo inumidito con acqua.
- Se si utilizza un detergente, si consiglia un liquido detergente privo di alcol e di ossidi.
- Per evitare di graffiare il rivestimento antimicrobico, pulirlo delicatamente.

# Quartex


BOG 110624 DT70XM ITA

Quartex Informatica  
Via Paolo Giovio 28 - 20144 Milano - Italy  
Telefono: + 39 02 4984998 Mail: info@quartex.it  
Cod.Fisc. 10879250156 - P.IVA 10879250156

Copyright © 2023, DT Research, Inc. All Rights Reserved.

# Quartex

## Monitor grado Medicale

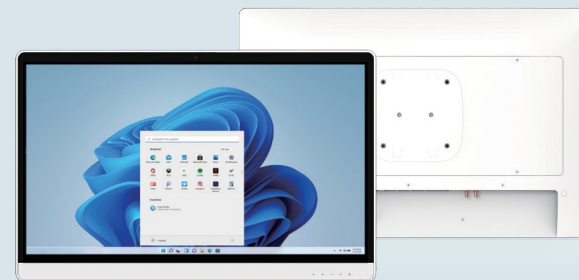

## Guida operativa di base

# 704MQ/ 707MQ

### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il monitor di grado medicale 704MQ/707MQ. Con moduli point-of-care completamente integrati in un design elegante e salva spazio questo monitor di grado medicale è la soluzione ottimale per migliorare il flusso di lavoro e il servizio, mentre si abbina a un personal computer, un controller integrato o un thin client.

Si prega di dedicare qualche minuto alla revisione del contenuto di questo documento per assicurarsi che l'installazione e l'avvio procedano senza intoppi. Il monitor di grado medicale è pronto per l'uso, appena estratto dalla scatola, nella sua configurazione predefinita quando alimentato dalla fonte di alimentazione fornita. La seguente documentazione offre indicazioni sugli elementi hardware e sulle funzionalità del monitor. Fare riferimento al fornitore del dispositivo per informazioni relative al sistema operativo software o alle applicazioni software.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Un adattatore di alimentazione AC-DC con cavo di alimentazione
- Un cavo HDMI
- Un cavo USB 2.0 da tipo B a tipo A per la connessione touchscreen
- Un cavo USB 3.0 da tipo B a tipo A per la connessione al sistema
- Guida operativa di base

### PRECAUZIONI

- Prestare sempre attenzione durante l'uso e la manipolazione del monitor di grado medico.
- Non smontare mai alcuna parte dell'involucro, poiché ciò invaliderebbe la garanzia del prodotto Monitor di grado medicale.
- Non utilizzare alcun adattatore AC/DC diverso da quello fornito con il dispositivo o da un ricambio acquistato presso il produttore.
- Nell'improbabile caso in cui siano presenti fumo, rumori anomali o odori strani, spegnere immediatamente il Monitor di grado medicale e scollegare tutte le fonti di alimentazione. Segnalare immediatamente il problema al fornitore del dispositivo.